

Bienvenida del Director General de Cynosure

En febrero de 2004, iniciamos nuestra andadura María José y yo al igual que en 1995 lo hicieramos con Candela Ibérica. Nuestra actual oficina se encuentra en la Avda. de Manoteras donde disponemos de almacén y oficinas. en una superficie de 200 metros cuadrados. En nuestros comienzos suponía un derroche ya que éramos 2 personas. Hoy día esta superficie se nos ha quedado pequeña por lo que estamos ampliando 3 veces más nuestro espacio. Desde el principio pensé que en poco tiempo seríamos un gran equipo, que la actividad se multiplicaría ... y efectivamente nuestro objetivo se ha conseguido. Todo gracias a nuestros clientes con la creciente demanda de nuestros productos y servicios.

"...la Calidad de nuestros productos ha mejorado extraordinariamente en los últimos años..."

Aposté por Cynosure y estoy encantado de que muchos de vosotros lo estéis haciendo también, porque la calidad de nuestros productos ha mejorado extraordinariamente en los últimos años. Se ha introducido la tecnología modular, integración de más de mil componentes separados en tan solo 15 módulos, posibilitando la integración de más láseres en un solo sistema, facilitando el mantenimiento de los mismos y acortando el tiempo de reparación.

La investigación I+D es nuestro AVE, queremos facilitaros las herramientas que soñasteis tener para cubrir la demanda de vuestros pacientes, algunas ya son realidad, otras están en camino.

El Apogee Elite se presenta como un equipo muy versátil y popular para múltiples tratamientos.

El Cynergy presenta el mayor avance en lesiones vasculares con el MultiPlex de disparo simultáneo de 2 longitudes de onda.

El Affirm viene a cubrir un espacio extraordinario en rejuvenecimiento microtérmico no ablativo. El complemento ideal para el rejuvenecimiento está por llegar, el reafirmante (tightening) es el nuevo láser Cynosure, que tiene previsto ver la luz para el verano de 2007, que además podrá incorporarse como módulo al Affirm.

Con esta pincelada comercial de presente y futuro os agradezco una vez más vuestra confianza, al igual que agradezco a mi equipo de profesionales que hagan posible los extraordinarios resultados que estamos consiguiendo.

Emitiremos este boletín de forma mensual, para compartir con vosotros las novedades. Os invitamos a contribuir con vuestros trabajos y comentarios que creáis puedan ser de interés para los lectores.

Por último, deseo que todos tengáis un feliz año lleno de paz y prosperidad

Florentino Breña.



Florentino Breña

DEPARTAMENTO CLÍNICO

Artículos
Consejos
Consultas
Talleres

COLABORACIONES

Dr. Pablo Boixeda
Dr. César Arroyo

Tablón

PREMIO A NUESTROS LECTORES

Descuento del 10% en todos
nuestros Productos Láser
para los 5 primeros pedidos
recibidos del 5 al 31 de enero 2007

Navidad Regalos para Todos

Todos nuestros clientes que hayan
adquirido alguno de nuestros
productos, han recibido un regalo
Navideño.

¡Esperamos que les haya gustado!

Datos Curiosos



Sabía que la palabra "Cynosure"
proviene del latín cynosure que
a su vez proviene del griego
"Kuno-soura", que significa "cola
de perro". También hace alusión
a la constelación de la Osa Menor,
que contiene la "estrella perro"
o "estrella del norte".

Otro significado es "un centro
de atracción", o aquello que sirve
para guiar o dirigir.



Departamento Clínico

Patricia Homar

Se incorporó a Cynosure España el pasado mes de Agosto, como Directora Clínica.

Patricia aporta una sólida formación académica en Medicina y es responsable de realizar entrenamientos en las aplicaciones clínicas de los equipos. Es asimismo responsable de la organización de los talleres prácticos.

En nuestro esfuerzo por dar el mejor servicio, hemos decidido abrir una sección en la que todos nuestros clientes puedan encontrar respuesta a sus dudas, y la información más reciente acerca del mundo del láser.

Podrán enviarnos los casos en los que se les ha presentado dificultades o problemas e intentaremos darle solución, para aprender a usar el láser de la mejor manera posible.

Pueden dirigirme sus consultas a la dirección de correo electrónico siguiente: dptoclinico@cynosurespain.com

Esperamos poder serle de ayuda.

Talleres

Periódicamente realizamos talleres para dar a conocer mejor las funciones de nuestros equipos, y como obtener los mejores resultados. La dinámica que seguimos es siempre la misma. Comenzamos con una exposición teórica del manejo del láser, sus aplicaciones clínicas, etc.

En una segunda parte realizamos el taller práctico. Los pacientes que voluntariamente se prestan al tratamiento, pueden ser incluso pacientes de los médicos asistentes.

En nuestra página web www.cynosurespain.com sección "Talleres y Congresos", podrá encontrar toda la programación prevista de talleres. Estos generalmente se realizan en la sede de los congresos a los que asistimos, pero también los llevamos a cabo de forma independiente.

Un taller es la mejor manera, aunque no la única, de conocer un láser, por eso le invitamos a asistir a ellos. Reserve su plaza con antelación.

Próximos Talleres

Viernes 4 de Mayo 2007

Láser Vascular: disparo simultáneo con Tecnología MultiPlex

Sábado 5 de Mayo 2007

Láser Depilación: láser Alejandrita de pulso variable
Láser Rejuvenecimiento Facial: Láser Fraccionado

Estos talleres se realizarán en la sede las Jornadas de Confrontaciones Terapéuticas en Sitges (Barcelona)

Recomendaciones

Es aconsejable no tratar a mujeres embarazadas. No hay ninguna evidencia de que el tratamiento láser afecte a estos pacientes, sin embargo evitaremos enfrentarnos a alguna acusación en caso de que la gestación sufriese algún contratiempo, durante el tratamiento láser.

El tratamiento en pacientes portadores de marcapasos es seguro ya que los láseres emiten dentro del espectro de las radiaciones electromagnéticas correspondientes a la luz (visible o no), y por lo tanto no provoca ningún tipo de interferencia con estos dispositivos.

Colaboraciones

Dr. Pablo Boixeda

Iniciamos esta sección, presentando alguno de los trabajos llevados a cabo por el Dr. Pablo Boixeda, con el láser Cynergy. Desde aquí queremos expresarle nuestra gratitud por esta interesantísima aportación.

Cáso 1

Varón de 55 años que presenta una mancha en vino de oporto con formación de tuberosidades, que no responde a tratamiento con láser de colorante pulsado. Se decide tratamiento con el láser Cynergy MultiPlex con el siguiente protocolo.

3 Sesiones: Spot 7mm
PDL 10 J/cm², 40 ms
Delay EXT
Nd:YAG 60 J/cm², 20 ms

1 Sesión final
Spot 7 mm
PDL 13 J/cm², 2 ms

Antes



Después



Caso 2

Mujer de mediana edad que presenta una malformación venosa labial (lago venoso) de 4 años de evolución. Fue tratada con una única sesión de láser Cynergy con Tecnología MultiPlex, con los siguientes parámetros:

1 Sesión: Spot 7 mm
PDL 10 J/cm² 40 ms
Delay EXT
Nd.YAG 80 J/cm², 20 ms

Con una única sesión la respuesta que se consigue es excelente.

Antes



Después



Dr. César Arroyo

Presentamos aquí los trabajos del Dr. Arroyo, de las clínicas CETA de Madrid, realizados con el láser Cynergy con Tecnología MultiPlex. Le estamos muy agradecidos por compartir con nosotros su experiencia en este tipo de tratamientos.

Mujer de 60 años con varices reticulares en muslos. Recibió tratamiento de esclerosis hace tres años con escasa respuesta.

AT: Obesidad grado II. HTA

Exploración Dermatológica:
Fitzpatrick II
Eccema de contacto en manos

Recibe tratamiento con el láser Cynergy con tecnología MultiPlex

1º Sesión
PDL 9/40 delay corto YAG 50/20


2ª Sesión
PDL 9/10 delay corto YAG 50/20

3ª Sesión
PDL 9/10 delay corto YAG 60/20

Buena Evolución

Antes

Después

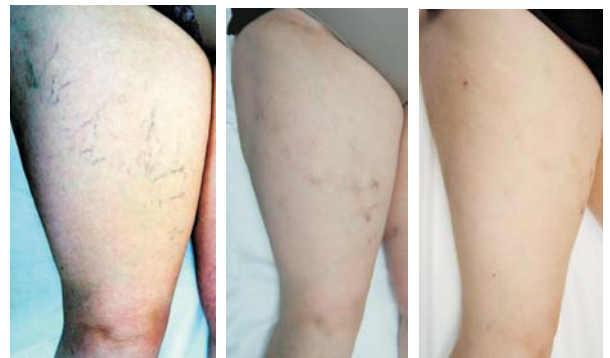

Mujer de 43 años que acude a consulta por telangiectasias faciales secundarias a rosácea, de varios años de evolución sin mejoría tras tratamiento tópico corticoideo y antibiótico.

AP sin interés

Exploración Dermatológica

Fototipo Fitzpatrick III
Piel y Anejos Telangiectasias difusas en región malar y nasal
Resto sin hallazgos

Se somete a tratamiento con el láser Cynergy con tecnología MultiPlex y recibe tres sesiones con intervalos de 4 semanas, experimentando desde las primeras sesiones clara mejoría.

PDL 9/10 Delay corto YAG 50/20.

Antes

Después

